

ЭСКАМЕД




Генератор радиочастотной абляции тканей сердца

- Измеряет проводимость ткани, подаёт сигнал при достижении трансмуральности.
- Автоматически отключается через 40 секунд, защищая ткань от избыточной абляции.
- Биполярная переменная подача энергии контролирует температуру абляции, предотвращая термические повреждения тканей.
- Встроенная конструкция, два переключателя.



Med-Zenith


Экраны дисплея генератора радиочастотной абляции

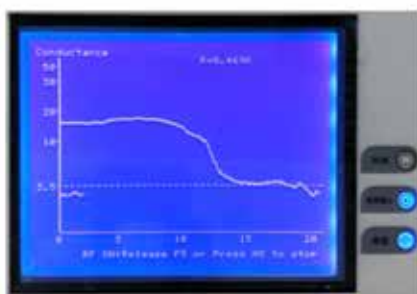

Режим абляции с радиочастотным зажимом

Проводимость удаляемой ткани отображается на оси Y, время — на оси X.

Когда кривые проводимости достигают нижнего порогового значения, система включает звуковые и визуальные индикаторы достижения трансмуральности (загорается индикаторная лампа трансмуральности, и система издаёт звуковой сигнал).

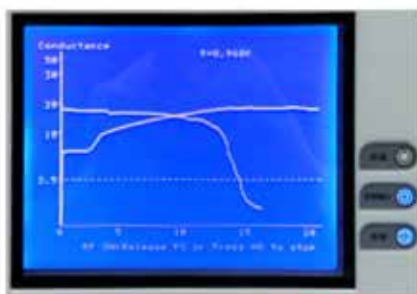

В случае плотной ткани, если трансмуральность не достигнута в течение 20 секунд, кривая проводимости продолжает отображаться на втором экране до достижения трансмуральности или в течение следующих 20 секунд.

Если трансмуральность не достигнута в течение 40 секунд, генератор автоматически отключается и прекращает абляцию для предотвращения повреждения тканей.



Режим абляции с радиочастотной ручкой

Радиочастотная мощность отображается на оси Y, время — на оси X.

Генератор останавливает абляцию через 40 секунд для предотвращения повреждения тканей.

Информация
для заказа



Генератор радиочастотной абляции
Модель: MZ-RFG



Med-Zenith



«Бейджин Мед-Зенит Медикал Сайентифик
Корпорейшн Лимитед»
(Beijing Med-Zenith Medical Scientific Corporation
Limited)
Адрес: №5, 2-я улица Чжунюань, Зона Свободной
Торговли Тяньчжу, район Шуньи, Пекин, 101312, Китай
(No. 5, 2nd Zhuyuan Street, Tianzhu Free Trade Zone,
Shunyi District, Beijing China 101312
Tel: 010-80411799 Fax: 010-80411700
Post code: 101312
E-mail: Customerservice@med-zenith.com
Web: www.med-zenith.com

Переведено на русский язык компанией
ООО «Эскамед», РФ.
Компания ООО «Эскамед» является официальным
дистрибьютором продукции компании «Med-Zenith»
(Мед-Зенит) на территории Российской Федерации.

ООО «ЭСКАМЕД»
117638, г. Москва, ул. Одесская,
д.2 БЦ «Лотос», Башня С,
Тел. +7 (499) 213 02 52
E-mail: info@escamed.ru
www.escamed.ru